

SERENITY
light



Product name	Pannolone Sagomato Serenity Light Super
Code	00037706300000
Ean code	8003670738749
Producer	Serenity S.P.A. - Ortona (Chieti) - Italia
Marking CE	Present – Declaration notified by Ministry of Health



CLASS I^a DISPOSABLE PRODUCT, ACCORDING TO THE COUNCIL DIRECTIVE 93/42 CEE CONCERNING THE MEDICAL DEVICES.

DESCRIPTION:

Anatomically shaped absorbent pad for light / moderate incontinence, suitable for anatomical female. The pad is made by an outer support of non-woven breathable white color material, impermeable to liquids but permeable to air. The anatomical shape is designed to follow the body and to provide protection where needed without marking. The pad is provided of a powdered adhesive on the entire length for optimum fixing and a system of longitudinal elastic for a better fit and seal. The central absorbent body is made up of multiple layers of cellulose and polymers.

FEATURES

SUPER ABSORBENT PAD

Thin and compact for complete discretion

ELASTICATED AND SHAPED BANDS

Perfect adherence without marking

CENTRAL layer

It distributes liquids throughout the pad

ADHESIVE STRIP

For fixing to normal underwear

LAYER OF RAPID FLUID ACQUISITION

Dry effect

Technical specifications

Product

Piece Total weight	g	40 +/-3 (42 with bag)
Total Length	mm	440 +/-7
Total Width	mm	176 +5/-3

Absorbent material features

Absorbent Fluff	fluff in cellulose with long fiber, in different thickness; not treated with chemical additives
Superabsorbent Polymer	Treated with Odour Control system

Non-Absorbent material features

Woven non woven backsheet	Polythene breathable white
Woven non woven topsheet	Polypropylene 100% Aloe treatment
Woven non woven lateral topsheet	Barriers in Polypropylene 100% Hydrophobic
T-Dry Layer	Acquisition Layer in microdrilled Polythene
Type of Curved leg elastic	n° Shaped anatomic Elastic Bands
Curved leg elastic	n° 2 + 2

Packaging

Pieces per bag	n°	30
Size of bag	mm	265x140x280
Weight of bag	g	1277+/-42
Volume of bag	cm3	10.388
Bags in carton	n°	8
Size carton	mm	568x293x561
Weight carton	g	11090
Volume carton	cm3	93.364

SERENITY
light



Product name	Pannolone Sagomato Serenity Light Super
Code	00037707300000
Ean code	8003670738763
Producer	Serenity S.P.A. - Ortona (Chieti) - Italia
Marking CE	Present – Declaration notified by Ministry of Health



CLASS I^a DISPOSABLE PRODUCT, ACCORDING TO THE COUNCIL DIRECTIVE 93/42 CEE CONCERNING THE MEDICAL DEVICES.

DESCRIPTION:

Anatomically shaped absorbent pad for light/ moderate incontinence, suitable for anatomical female. The pad is made by an outer support of non-woven breathable white color material, impermeable to liquids but permeable to air. The anatomical shape is designed to follow the body and to provide protection where needed without marking. The pad is provided of a powdered adhesive on the entire length for optimum fixing and a system of longitudinal elastic for a better fit and seal. The central absorbent body is made up of multiple layers of cellulose and polymers.

FEATURES

SUPER ABSORBENT PAD

Thin and compact for complete discretion

ELASTICATED AND SHAPED BANDS

Perfect adherence without marking

CENTRAL layer

It distributes liquids throughout the pad

ADHESIVE STRIP

For fixing to normal underwear

LAYER OF RAPID FLUID ACQUISITION

Dry effect

Technical specifications

Product

Piece Total weight	g	50 +/-3
Total Length	mm	500 +/-7
Total Width	mm	200 +5/-3

Absorbent material features

Absorbent Fluff	fluff in cellulose with long fiber, in different thickness; not treated with chemical additives
Superabsorbent Polymer	Treated with Odour Control system

Non-Absorbent material features

Woven non woven backsheet	Polythene breathable white
Woven non woven topsheet	Polypropylene 100% Aloe treatment
Woven non woven lateral topsheet	Barriers in Polypropylene 100% Hydrophobic
T-Dry Layer	Acquisition Layer in microdrilled Polythene
Type of Curved leg elastic	n° Shaped anatomic Elastic Bands
Curved leg elastic	n° 2 + 2

Packaging

Pieces per bag	n°	30
Size of baf	mm	285x150x330
Weight of bag	g	1430+/-47
Volume of bag	cm3	14.108
Bags in carton	n°	4
Size carton	mm	568x338x336
Weight carton	g	6380
Volume carton	cm3	64.507



SCHEDA CARATTERISTICHE TECNICHE



SLIP PULL UP SOFT DRY EXTRA taglia MEDIUM

CE PRODOTTO RISPONDENTE AI REQUISITI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 93/42.
DISPOSITIVO MEDICO MONOUSO CLASSE I^a

DESCRIZIONE:

Slip monouso assorbente, con barriera ai liquidi, da indossare come la normale biancheria intima. Semplice ed immediato da indossare, non richiede la presenza di adesivi riposizionabili, garantisce ottima vestibilità, comfort e libertà di movimento. Traspirante su tutta superficie a contatto con la pelle.

INDICAZIONI D'USO:

È un prodotto per uomo e donna, in particolare per chi ha una vita attiva, da utilizzarsi in caso di rieducazione motoria e di toilette training. Indicato per i casi di incontinenza moderata.

COMPOSIZIONE:

- **corpo centrale assorbente:** fluff in pura cellulosa a fibra lunga per favorire la migliore diffusione dei liquidi; non trattata con additivi chimici, né resine, né collanti tossici;
- **polimeri superassorbenti:** granuli di poliacrilato, omogeneamente distribuiti nel corpo assorbente
- **acquisition layer:** tessuto filtrante che favorisce la diffusione dei liquidi e riduce il ritorno di umidità;
- **strato a contatto con la pelle:** tessuto non tessuto (polipropilene) ipoallergico
- **rivestimento esterno:** morbido tessuto non tessuto traspirante (polipropilene) accoppiato centralmente con film di polietilene traspirante e antifruscio. Il rivestimento esterno in tessuto-non tessuto traspirante lascia la pelle libera di respirare, prevenendo gli arrossamenti e garantendo una maggiore integrità cutanea.
- **fascia addominale:** morbidi elastici che garantiscono maggior comfort: con speciale struttura, dritti sulla fascia in vita e curvi sui fianchi, per garantire una migliore vestibilità e aderenza.
- **elastici curvi a fettuccia,** anteriori e posteriori: 3+3 elastici curvi a fettuccia nella zona interno gamba, garantiscono aderenza e sicurezza contro le perdite; 3+3 elastici curvi a fettuccia nella zona inguine e glutei, offrono migliore aderenza del tampone e miglior comfort e assorbenza sia da asciutto sia in uso.
- **barriere antifurioscite:** in morbido tessuto non tessuto idrofobo a tre livelli di protezione;

Serenity S.p.A. - Sede Legale, Amministrativa e Stabilimento: Località Cucullo snc - 66026 ORTONA (CH)

Telefono 085 9032184 - 9031072 - 9031073 - Fax 085 9032309

Sede Commerciale: Via F. Saldarini Catelli, 3/5 - 22070 GRANDATE (CO)

Codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti 01251280689 - P.IVA 01635360694 - C.C.I.A.A. REA 99632

Iscriz. Tribunale di Chieti n. 6281 - Capitale Sociale € 12.000.000,00 i.v. - Posta elettronica certificata: serenity@legalmail.it


Direzione e coordinamento di Ontex B.V.B.A. - Sede Legale: Genthof 5, 9255 Buggenhout, Belgium

- **saldature laterali:** morbide e garantiscono grande tenuta e sicurezza. Al momento del cambio, sono facilmente apribili con un semplice gesto;
- **etichetta ripiegata a «Z» sul retro:** per richiudere il prodotto dopo l'uso;
- **indicatore di cambio:** rilevatore di umidità a scomparsa graduale;
- **latex free:** il prodotto non contiene lattice;
- **imballaggio primario:** in confezione compact, con apertura facilitata ed identificazione del lotto di produzione;
- **imballaggio secondario:** imballo esterno rispondente ai requisiti della privacy con codici alfanumerici per una facile identificazione.



SLIP PULL UP *be free*



Nome prodotto	SLIP PULL UP SOFT DRY EXTRA
Taglia	Medium
Grado di incontinenza	Moderata
Livello di assorbenza	 EXTRA
Identificazione livello di assorbenza/ taglia	Giallo
Circonferenza bacino (cm)	80 – 110
Lunghezza (mm)	780 +/- 20
Larghezza (mm)	680 +/- 20
Pezzi per sacchetto	14
Quantità sacchetti per imballo	8
Dimensioni imballo esterno (mm)	590x240x575
Codice Prodotto	37211400000
Codice Classificazione ISO	R. 09.30.04.006
Codice Classificazione CND	T04010103
Codice EAN	8058150563076
Codice PARAF (Fustella ottica)	971176437

I valori di riferimento indicati, determinati statisticamente con una rappresentatività del 68,25% del lotto di produzione, sono soggetti alla "tolleranza" conseguente ai sistemi di produzione ed alle metodologie di valutazione utilizzate.

**EN ISO
13485:2012**

**ISO
VISION 2000**





SCHEDA CARATTERISTICHE TECNICHE

SLIP PULL UP SOFT DRY EXTRA taglia LARGE

CE **PRODOTTO RISPONDENTE AI REQUISITI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 93/42.
DISPOSITIVO MEDICO MONOUSO CLASSE I^a**

DESCRIZIONE:

Slip monouso assorbente, con barriera ai liquidi, da indossare come la normale biancheria intima. Semplice ed immediato da indossare, non richiede la presenza di adesivi riposizionabili, garantisce ottima vestibilità, comfort e libertà di movimento. Traspirante su tutta superficie a contatto con la pelle.

INDICAZIONI D'USO:

È un prodotto per uomo e donna, in particolare per chi ha una vita attiva, da utilizzarsi in caso di rieducazione motoria e di toilette training. Indicato per i casi di incontinenza moderata.

COMPOSIZIONE:

- **corpo centrale assorbente:** fluff in pura cellulosa a fibra lunga per favorire la migliore diffusione dei liquidi; non trattata con additivi chimici, né resine, né collanti tossici; doppio strato assorbente;
- **polimeri superassorbenti:** granuli di poliacrilato, maggiormente concentrati nella parte centrale del corpo assorbente;
- **acquisition layer:** tessuto filtrante che favorisce la diffusione dei liquidi e riduce il ritorno di umidità;
- **strato a contatto con la pelle:** tessuto non tessuto (polipropilene) ipoallergico
- **rivestimento esterno:** morbido tessuto non tessuto traspirante (polipropilene) impermeabile e antifruscio, con stampa in continuo colorata (il colore identifica il livello di assorbenza) con indicazione della taglia di riferimento, per permettere l'immediata identificazione.
Il rivestimento esterno in tessuto-non tessuto traspirante lascia la pelle libera di respirare, prevenendo gli arrossamenti e garantendo una maggiore integrità cutanea.
- **fascia addominale:** morbidi elastici che garantiscono vestibilità, aderenza e comfort: 17 elastici tubolari nella parte anteriore e 15 nella parte posteriore più 3 ulteriori elastici tubolari curvi nella parte posteriore;
- **elastici curvi,** anteriori e posteriori: 3+3 elastici curvi nella zona interno gamba, garantiscono aderenza e sicurezza contro le perdite; 3+3 elastici curvi a fettuccia nella zona inguine e glutei, offrono migliore aderenza del tampone e miglior comfort e assorbenza sia da asciutto sia in uso.
- **barriere antifurioscite:** in morbido tessuto non tessuto idrofobo a tre livelli di protezione;
- **saldature laterali:** realizzate con tecnologia ad ultrasuoni, risultano più morbide e garantiscono grande tenuta e sicurezza. Al momento del cambio, sono facilmente apribili con un semplice gesto;

Serenity S.p.A. - Sede Legale, Amministrativa e Stabilimento: Località Cucullo snc - 66026 ORTONA (CH)

Telefono 085 9032184 - 9031072 - 9031073 - Fax 085 9032309

Sede Commerciale: Via G.Garibaldi 118 - 22073 FINO MORNASCO (CO)

Codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti 01251280689 - P.IVA 01635360694 - C.C.I.A.A. REA 99632

Iscriz. Tribunale di Chieti n. 6281 - Capitale Sociale € 12.000.000,00 i.v. - Posta elettronica certificata: serenity@legalmail.it

Direzione e coordinamento di Ontex B.V.B.A. - Sede Legale: Genthof 5, 9255 Buggenhout, Belgium

- **etichetta ripiegata a «Z» sul retro:** per richiudere il prodotto dopo l'uso;
- **indicatore di cambio:** rilevatore di umidità a scomparsa graduale;
- **latex free:** il prodotto non contiene lattice;
- **imballaggio primario:** in confezione compact, con apertura facilitata ed identificazione del lotto di produzione;
- **imballaggio secondario:** imballo esterno rispondente ai requisiti della privacy con codici alfanumerici per una facile identificazione.




SLIP PULL UP *be free*



Nome prodotto	SLIP PULL UP SOFT DRY EXTRA
Taglia	Large
Grado di incontinenza	Moderata
Livello di assorbenza	 EXTRA
Identificazione livello di assorbenza/ taglia/ stampa	Giallo
Circonferenza bacino (cm)	110 – 150
Lunghezza (mm)	920 +/- 20
Larghezza (mm)	780 +/- 15
Pezzi per sacchetto	14
Quantità sacchetti per imballo	8
Dimensioni imballo esterno (mm)	590x255x575
Codice Prodotto	00037212200000
Codice Classificazione ISO	R. 09.30.04.003
Codice Classificazione CND	T04010103
Codice EAN	8058150560273
Codice PARAF (Fustella ottica)	923535177

I valori di riferimento indicati, determinati statisticamente con una rappresentatività del 68,25% del lotto di produzione, sono soggetti alla "tolleranza" conseguente ai sistemi di produzione ed alle metodologie di valutazione utilizzate.

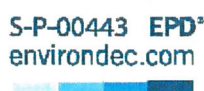

EN ISO
13485:2012



Serenity S.p.A. - Sede Legale, Amministrativa e Stabilimento: Località Cucullo snc - 66026 ORTONA (CH)

Telefono 085 9032184 - 9031072 - 9031073 - Fax 085 9032309

Sede Commerciale: Via G.Garibaldi 118 – 22073 FINO MORNASCO (CO)

Codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti 01251280689 - P.IVA 01635360694 - C.C.I.A.A. REA 99632

Iscriz. Tribunale di Chieti n. 6281 - Capitale Sociale € 12.000.000,00 i.v. - Posta elettronica certificata: serenity@legalmail.it

Direzione e coordinamento di Ontex B.V.B.A. - Sede Legale: Genthof 5, 9255 Buggenhout, Belgium



Technical Data Sheets

TRAVERSA SALVAMATERASSO 60x90 cm UNDERPAD CLASSIC 60x90



CLASS I^a DISPOSABLE PRODUCT, ACCORDING TO THE COUNCIL DIRECTIVE 93/42 CEE CONCERNING THE MEDICAL DEVICES.

DESCRIPTION:

Serenity Classic Underpads offer effective protection for bedding and all other surfaces requiring protection. These easy to use products can simply be fitted over normal linen in order to create a safe and hygienic surface. It consists of a layer of cellulose coupled with a layer of soft TNT and a non-slip polyethylene outer lining that creates a reliable liquid barrier.

DOUBLE LAYER OF CELLULOSE

Together with a layer of soft non-woven fabric

EXTERNAL COVER IN NON-SLIP POLYTHENE

Creating a barrier against the passage of liquids

LATEX FREE

COMPOSITION:

Composed of a waterproof material to which it is superimposed in the central part of the support an absorbent pad in pure cellulose fluff covered by a drape in nonwoven fabric hypoallergenic

TRAVERSA SALVAMATERASSO 60x90 cm

UNDERPAD CLASSIC 60x90

Product name	Traversa Salvamaterasso 60x90 cm
Size	60x90 cm
Code	00037642300500
EAN code	8003670233350
PARAF code	903600551
Total Length	900+/-10 mm
Total Width	600 +/- 10 mm
Pieces per bag	30
Size of bag	290x160x430 mm
Weight of bag	2365 +/- 78
Volume of bag	19952 cm3
Bags in carton	4
Size carton	608x328x451 mm
Weight of carton	10270 gr
Volume carton	96.382 cm3

SERENITY
light



Product name	Pannolone Sagomato Serenity Light Super
Code	00037704300000
Ean code	8003670738701
Producer	Serenity S.P.A. - Ortona (Chieti) - Italia
Marking CE	Present – Declaration notified by Ministry of Health



CLASS I^a DISPOSABLE PRODUCT, ACCORDING TO THE COUNCIL DIRECTIVE 93/42 CEE CONCERNING THE MEDICAL DEVICES.

DESCRIPTION:

Anatomically shaped absorbent pad for very light incontinence, suitable for anatomical female. The pad is made by an outer support of non-woven breathable white color material, impermeable to liquids but permeable to air. The anatomical shape is designed to follow the body and to provide protection where needed without marking. The pad is provided of a powdered adhesive on the entire length for optimum fixing and a system of longitudinal elastic for a better fit and seal. The central absorbent body is made up of multiple layers of cellulose and polymers.

FEATURES

SUPER ABSORBENT PAD

Thin and compact for complete discretion

ELASTICATED AND SHAPED BANDS

Perfect adherence without marking

CENTRAL layer

It distributes liquids throughout the pad

ADHESIVE STRIP

For fixing to normal underwear

LAYER OF RAPID FLUID ACQUISITION

Dry effect

Technical specifications

Product

Piece Total weight	g	13 +/-2
Total Length	mm	280+/-5
Total Width	mm	122 +5/-3

Absorbent material features

Absorbent Fluff	fluff in cellulose with long fiber, in different thickness; not treated with chemical additives
Superabsorbent Polymer	Treated with Odour Control system

Non-Absorbent material features

Woven non woven backsheet	Polythene breathable white
Woven non woven topsheet	Polypropylene 100% Aloe treatment
Woven non woven lateral topsheet	Barriers in Polypropylene 100% Hydrophobic
T-Dry Layer	Acquisition Layer in microdrilled Polythene
Type of Curved leg elastic	n° Shaped anatomic Elastic Bands
Curved leg elastic	n° 2 + 2

Packaging

Pieces per bag	n°	30
Size of bag	mm	125x115x18
Weight of bag	g	475+/-15
Volume of bag	cm3	3.830
Bags in carton	n°	8
Size carton	mm	403x398x256
Weight carton	g	4380
Volume carton	cm3	41.061

SERENITY
light



Product name	Pannolone Sagomato Serenity Light Super
Code	00037705300000
Ean code	8003670738725
Producer	Serenity S.P.A. - Ortona (Chieti) - Italia
Marking CE	Present – Declaration notified by Ministry of Health



CLASS I^a DISPOSABLE PRODUCT, ACCORDING TO THE COUNCIL DIRECTIVE 93/42 CEE CONCERNING THE MEDICAL DEVICES.

DESCRIPTION:

Anatomically shaped absorbent pad for light incontinence, suitable for anatomical female. The pad is made by an outer support of non-woven breathable white color material, impermeable to liquids but permeable to air. The anatomical shape is designed to follow the body and to provide protection where needed without marking. The pad is provided of a powdered adhesive on the entire length for optimum fixing and a system of longitudinal elastic for a better fit and seal. The central absorbent body is made up of multiple layers of cellulose and polymers.

FEATURES

SUPER ABSORBENT PAD

Thin and compact for complete discretion

ELASTICATED AND SHAPED BANDS

Perfect adherence without marking

CENTRAL layer

It distributes liquids throughout the pad

ADHESIVE STRIP

For fixing to normal underwear

LAYER OF RAPID FLUID ACQUISITION

Dry effect

Technical specifications

Product

Piece Total weight	g	24+/-2
Total Length	mm	350+/-5
Total Width	mm	140+5/-3

Absorbent material features

Absorbent Fluff	fluff in cellulose with long fiber, in different thickness; not treated with chemical additives
Superabsorbent Polymer	Treated with Odour Control system

Non-Absorbent material features

Woven non woven backsheet	Polythene breathable white
Woven non woven topsheet	Polypropylene 100% Aloe treatment
Woven non woven lateral topsheet	Barriers in Polypropylene 100% Hydrophobic
T-Dry Layer	Acquisition Layer in microdrilled Polythene
Type of Curved leg elastic	n° Shaped anatomic Elastic Bands
Curved leg elastic	n° 2 + 2

Packaging

Pieces per bag	n°	30
Size of bag	mm	265x110x225
Weight of bag	g	823+/-27
Volume of bag	cm3	6.559
Bags in carton	n°	8
Size carton	mm	468x273x476
Weight carton	g	7200
Volume carton	cm3	60.816